

Краткий гайд как пользоваться приложением.

Кароче, берем подключаем приборы к компу к свободным USB портам. Затем включаем их. Обязательно включать весы через зажатие кнопок включения и кнопки слева от нее. Потом надо переключиться 3 клавишей на меню протокол, войти в него(там должно быть 1С) и нажать кнопку включения. Мешалку кнопкой сзади влючаем и все должно более или менее работать. Затем открываем диспетчер устройств и выбираем COM порты для мешалки COM2 и настройки как на первом рисунке. Для весов COM4 и настройки как на втором рисунке. После этого надо открыть папку с драйверами USB_CH341SER, в папке “CH341SER” открываем “Setup.exe” и там все по умолчанию, не помню возможно надо нажимать кнопки далее.

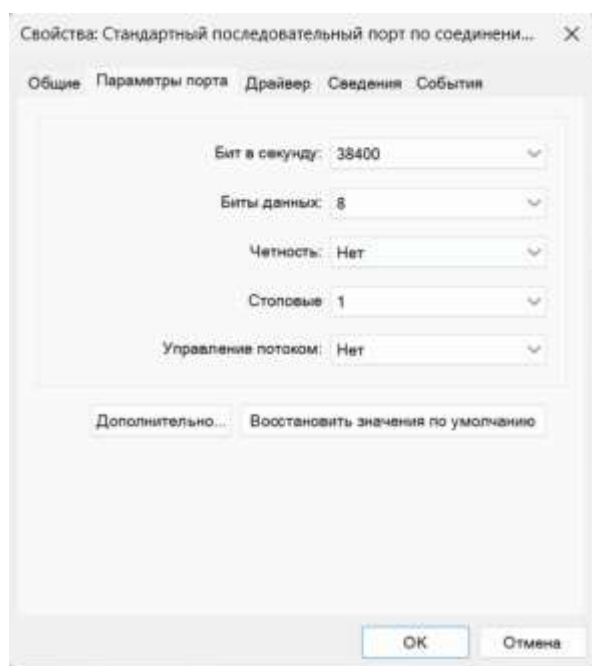


Рис. 1

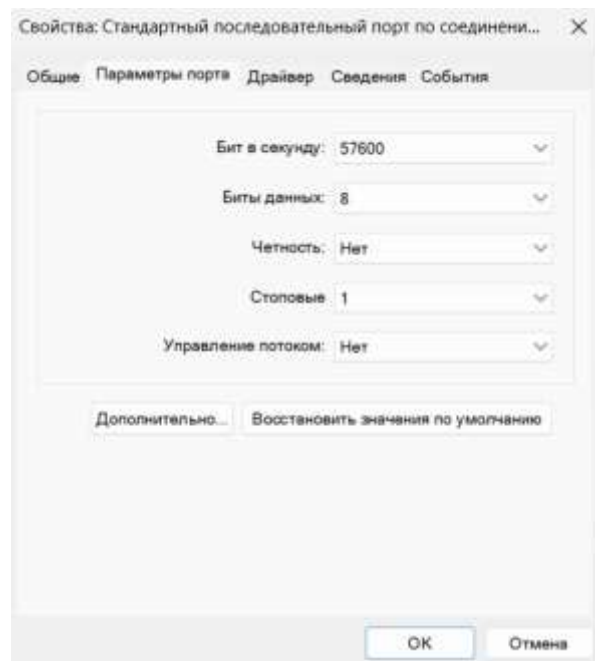


Рис. 2

Теперь, когда вы настроили, дай бок, эти девайсы, можно преступить к использованию. Чтобы запустить отдельную мешалку есть окошечко на рисунке три, а также кнопки во вкладке управление. Окно полностью функционально, вы можете писать сами цифры скорости, можете задавать их через выбор значений(1,10,100) и плюс-минус. Затем нажмите кнопку “Enter” на клавиатуре, чтобы записать значения. Чтобы запустить запись в файл значений с весов и мешалки, есть кнопка “Получить скорость и момент” указанная на рисунке четыре, и да он записывает и массу. Чтобы закончить запись нажмите на эту же кнопку(у нее поменяется название). Появится меню для сохранения файла(при условии что данные записались). Скорость можно менять во время записи. Остальные кнопки тоже функциональны, но пока не стоит их использовать. Таймер работает по кнопке “Пуск”, его значение задаются стрелочками справа, но надо мышкой выбирать, что хотите задать часы или минуты или секунды. Также вы можете в ручную сохранить данные по кнопке “Сохранить”, там будет 2 кнопки одинаковые по функциональности.

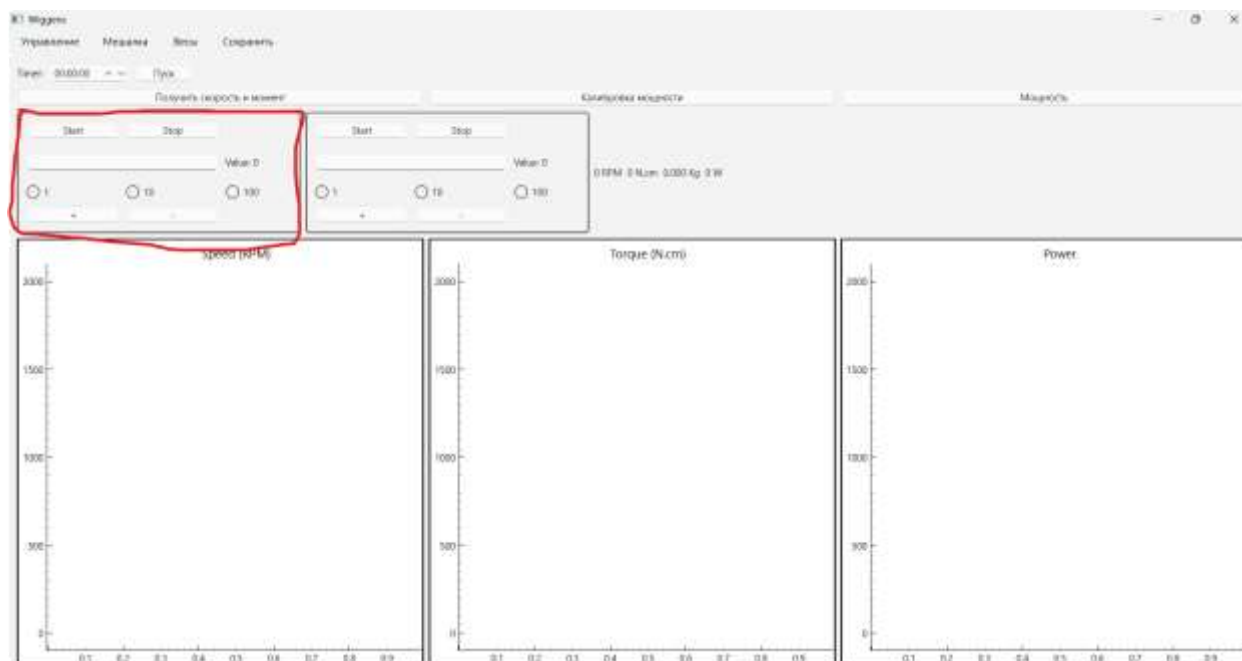


Рис. 3

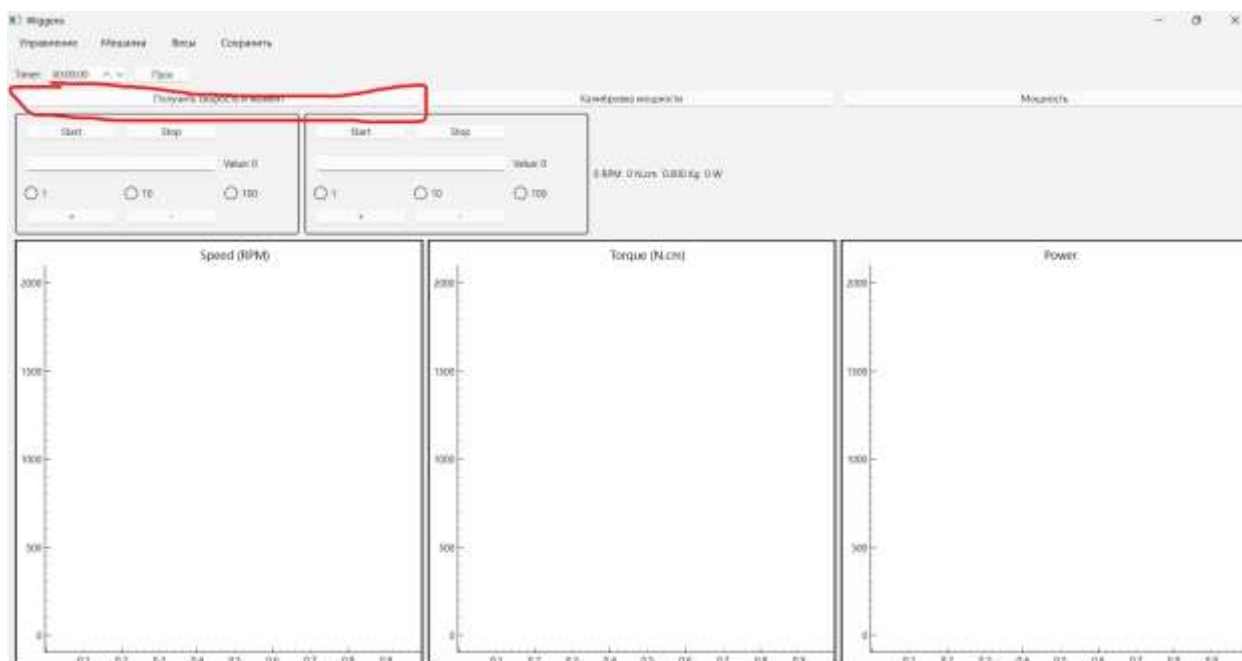


Рис.4